

aer spacer

Aerocámara Bi-Valvulada



Cámara espaciadora de 215 ml, antiestática con mascarilla de sello perfecto.

- Para cada quien, un color distinto
 - rojo para lactantes
 - amarillo para niños
 - naranja para adolescentes
 - verde para adultos
 - azul para pico bucal
- Sistema bi-valvular: válvula inspiratoria y espiratoria con gran sensibilidad al flujo
- Gracias a su sistema desmontable, AeroSpacer es muy fácil de lavar.
- Con AeroSpacer nunca tendrás que preocuparte por perder una pieza, pues todas son de tamaños visibles. La válvula inspiratoria está inyectada en una sola pieza
- Ideal para facilitar el depósito del medicamento.
- Con silbato que avisa cuando la maniobra es incorrecta.
- Disponible con mascarilla para lactante, infantil, juvenil, adultos y pico bucal



Mascarilla con diseño anatómico para adaptarse a distintas formas faciales, que evita molestias y pérdida de medicamento



AeroSpacer cuenta con un adaptador flexible que permite poder utilizar cualquier marca de inhalador presurizado

Todas las partes (mascarilla, válvula, cámara y adaptador) son fabricadas con materiales atóxicos, libres de estrías, rebabas y/o aristas cortantes




- Sistema de codificación de colores, para que siempre escojas la aerocámara correcta




- Empaque inteligente e higiénico. Embalaje primario: bolsa de polietileno cristal sellada. Embalaje secundario: caja de microcorrugado que contiene la aerocámara más el instructivo de uso.

- Premio Sello Buen Diseño Argentino 2018
- Certificado ISO 13485:2003
- Certificado ISO 9001:2008

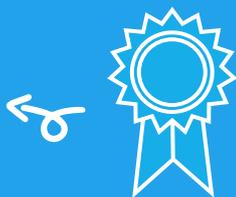

- Con AeroSpacer los más pequeños de la casa, y también los grandes, pueden personalizar su aerocámara gracias a los divertidos stickers incluidos, listos para pegar donde quieras

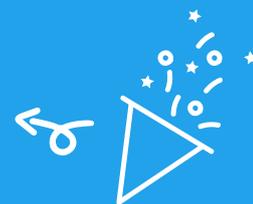

MEDIDAS GENERALES:

ANCHO

LARGO

DIÁMETRO

PROFUNDIDAD

• Cámara			110 mm	50 mm	
• Máscara lactante	58 mm		76 mm		28 mm
• Máscara infantil	80 mm		92 mm		28 mm
• Máscara juvenil	85 mm		100 mm		40 mm
• Máscara adulto	100 mm		120 mm		48 mm